



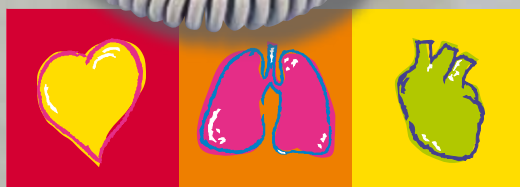

DEFIGARD 5000

Una nueva visión en desfibrilación hospitalaria

El DEFIGARD 5000 combina la eficacia de un desfibrilador bifásico de impulsos (*MULTIPULSE BIOWAVE®*) con la monitorización de precisión, y la pantalla en color más grande disponible en el mercado internacional.

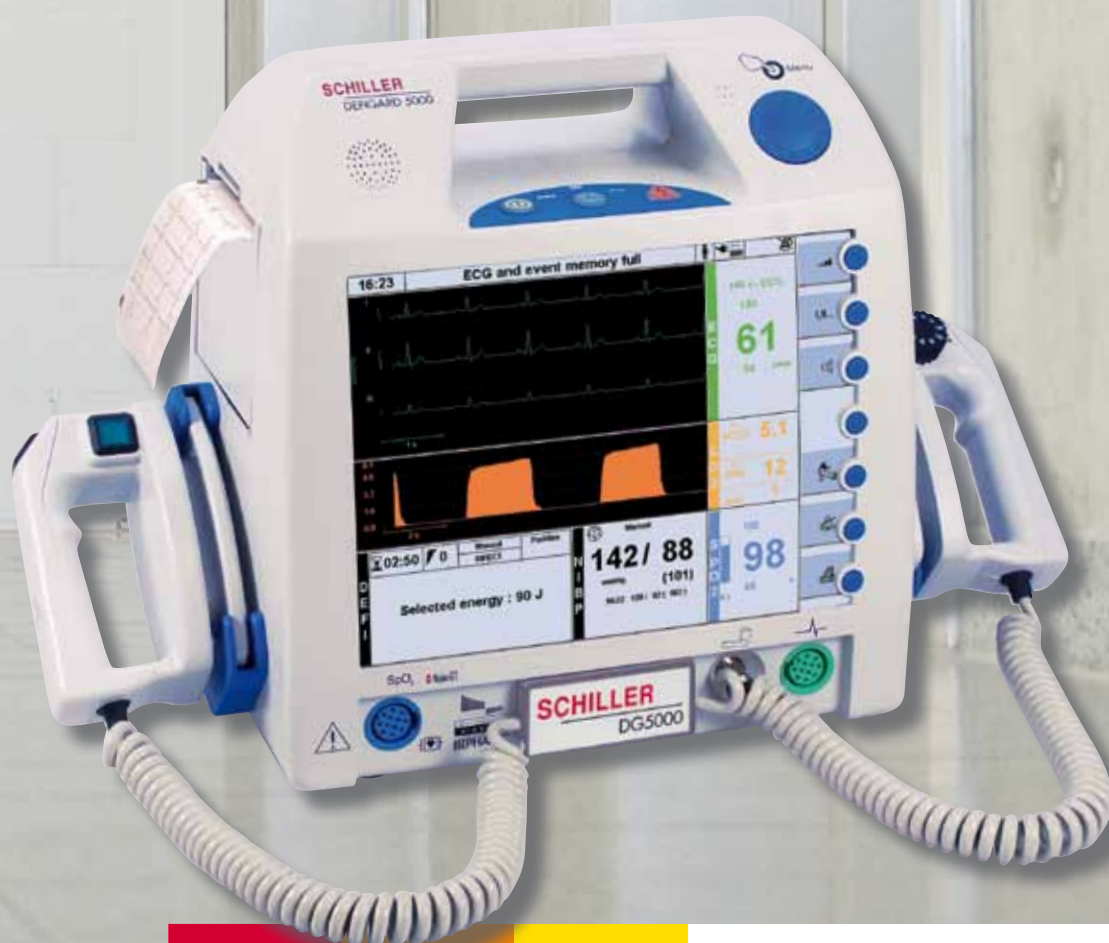

SCHILLER

The Art of Diagnostics

DEFIGARD 5000

Monitor und Defibrillator

La pantalla en color de gran tamaño (10,4") permite presentar simultáneamente hasta 12 derivaciones de ECG. El botón de navegación y las teclas de acceso directo proporcionan un acceso rápido a todos los parámetros, y hacen que el equipo resulte extremadamente sencillo y fácil de utilizar. Gracias al modo de desfibrilación AED (desfibrilador externo automático) y manual, el DEFIGARD 5000 es el equipo ideal en caso de paro cardíaco:

- Utilización de almohadillas, palas o cucharas
- El marcapasos externo y las funciones de monitorización, como ECG, SpO₂ (Masimo o Nellcor), CO₂ (IRMA) y NIBP, permiten la monitorización y atención continuas del paciente.

Disponibles diversas funciones sofisticadas

Desfibrilación utilizando la tecnología *MULTIPULSE BIOWAVE*® de baja energía.

El sistema de cassetes permite pasar rápidamente de un modo de desfibrilación a otro

- Modo AED con almohadillas
Energía configurable de 2 a 200 J (adultos) o de 2 a 70 J (niños); detección automática de electrodos pediátricos y ajuste de energía
El usuario es guiado por el proceso de desfibrilación mediante mensajes de texto y voz



- Modo manual con palas o almohadillas, selección de energía entre 2 y 200 J
- Desfibrilación interna: 2 a 30 J



DEFIGARD 5000

Marcapasos (opcional)

- Modo de funcionamiento Fijo, A demanda o Hiperestimulación (frecuencia x3)
- Memorización de los ajustes (corriente y frecuencia) para una reanudación rápida de la estimulación en caso necesario.

Monitor:

- Pantalla de cristal líquido en color de gran tamaño (10,4'')
- Visualización: Instrucciones AED, medición y curvas para SpO2, CO2, NIBP y hasta 12 derivaciones de ECG

Impresora (opcional):

- Impresora de 3 canales
- Impresión automática o manual de curvas, mediciones, eventos, tendencias y alarmas

Registro de datos:

- Memoria interna que permite el almacenamiento de hasta 45 minutos de datos de ECG y 500 eventos en modo AED, así como datos de tendencias de 24 horas, tanto gráficas como tabulares, para todos los parámetros
- Descarga de datos de AED a través del puerto USB

Transmisión:

- Transmisión de ECG de 12 canales a través de GSM o módem estándar (opcional)
- Conexión Ethernet o USB para actualización del software



Presentación simultánea de 12 derivaciones de ECG



Pletismograma



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com



SCHILLER
The Art of Diagnostics